



MAX  
OPTIMAS



THE INMODE ERA



M A X

# OPTIMAS

**TECNOLOGIA MELHORADA.  
RESULTADO ÓPTIMO.  
MAIOR CONTROLO E  
PRECISÃO.**

Por que tantos profissionais e pacientes escolhem a InMode? Porque as nossas tecnologias são líderes na sua categoria, concebidas para potencializar a sua experiência e resultados. Ouvimos os nossos clientes mais exigentes e transformamos as nossas soluções estéticas para nos adaptarmos à sua visão e necessidades. Quando a nossa engenharia evolui, você também evolui.

Optimas Max é uma plataforma estética multifuncional que permite oferecer os tratamentos mais procurados pelos pacientes: radiofrequência fracionada (FRF), luz pulsada intensa (IPL), depilação e procedimentos vasculares.

Com o Optimas Max, terá mais controlo, maior potência e resultados mais rápidos, para que possa oferecer o seu melhor trabalho e alcançar os resultados que os seus pacientes esperam.

Welcome to The InMode Era.



# MORPHEUS8

con



## MORPHEUS8 *burst*



Morpheus8 Burst é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (FRF) destinada a tratamentos dermatológicos faciais que requerem a contração/coagulação de tecidos moles ou hemostasia. Equipado com as funções exclusivas Burst e Scale, o Morpheus8 Burst tem a capacidade única de aplicar automaticamente, em um único pulso, radiofrequência bipolar em vários níveis de profundidade dos tecidos moles, contraindo tanto o tecido adiposo quanto o tecido dérmico. A combinação das pontas Prime 12 pinos, Morpheus8 24 pinos e Resurfacing 24 pinos permite uma personalização precisa do tratamento, alcançando resultados clínicos de alto impacto.

## MORPHEUS8 *burst deep*



Morpheus8 Burst Deep é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (FRF) destinada a tratamentos dermatológicos corporais que requerem a contração/coagulação de tecidos moles ou hemostasia. Com a capacidade de proporcionar uma contração profunda e multinível dos tecidos, o Morpheus8 Burst Deep oferece os níveis mais profundos de deposição de energia de radiofrequência direcionada disponíveis, protegendo a epiderme e permitindo, ao mesmo tempo, que uma maior quantidade de energia seja aplicada na rede fibroseptal e no tecido adiposo.

Equipado com as tecnologias patenteadas Burst e Scale, a ponta de 40 pinos do Morpheus8 Burst Deep aplica automaticamente energia de RF bipolar, em intervalos de milissegundos, a profundidades de tratamento e níveis de energia multinível em um único pulso.

### Especificações

|                     | MORPHEUS8 DEEP                       | MORPHEUS8                            | RESURFACING | PRIME     |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| Profundidade Burst: | várias profundidades entre 2mm - 7mm | duplas profundidades entre 2mm - 5mm |             |           |
| Profundidade Scale: | várias profundidades entre 2mm - 7mm | duplas profundidades entre 2mm - 5mm |             |           |
| Nº do Micropins:    | 40                                   | 24                                   | 24          | 12        |
| Depth Profile:      | 2mm - 7mm                            | 1mm - 5mm                            | 0.5mm       | 1mm - 4mm |
| Heat Profile:       | +1.0mm                               | +1.0mm                               | +0.25mm     | +1.0mm    |

MORPHEUS8 *burst*





## FORMA/PLUS

Forma e Plus são tecnologias térmicas inovadoras que aplicam energia de radiofrequência bipolar direcionada às camadas dérmicas e subdérmicas. Equipadas com um sistema inteligente de monitorização epidérmica, proporcionam procedimentos não invasivos e indolores que são seguros e eficazes. Os termistores de RF com ajuste automático integrados leem a temperatura da pele 1000 vezes por segundo, permitindo que o tratamento atinja temperaturas ótimas clinicamente comprovadas. O Forma é indicado para áreas pequenas e o Plus para áreas corporais grandes.

| <i>Especificações:</i> | FORMA                           | PLUS          |
|------------------------|---------------------------------|---------------|
| Nº de Electrodo:       | 3                               | 3             |
| Tamanho do Spot:       | 2.2cm x 2.5cm                   | 4.2cm X 4.6cm |
| Temperatura de corte:  | Ajustável pelo operador até 43° |               |
| Frequência de saída:   | 1 MHz                           |               |



## Introducing LUMECCA *peak*



A luz pulsada intensa (IPL) Lumecca Peak, concebida com 25% mais potência ótica e uma duração de pulso mais curta, oferece resultados mais rápidos no tratamento de lesões vasculares e pigmentadas, vasos superficiais e fotodano em tons de pele claros e escuros. A lâmpada flash de xenônio personalizada, a ponta de resfriamento de safira grande e a alta frequência de repetição de pulsos reduzem os tempos de tratamento, permitindo obter um fotorejuvenescimento em menos sessões do que com o IPL padrão.

### *Especificações:*

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tamanho do spot:         | 30 mm x 10 mm            |
| Fluência:                | 5 - 30 J/cm <sup>2</sup> |
| Duração do impulso:      | 1.5 - 15 msec            |
| Guia de Luz:             | 15°C - 22°C              |
| Frequência de repetição: | 1 pps                    |
| Comprimento de onda:     |                          |
| 515 SR:                  | 515 - 1200 nm            |
| 580 SR:                  | 580 - 1200 nm            |

# SINTA-SE SEGURO SABENDO QUE TEM O CONTROLO

*Introducing*

## FUSION *light* / FUSION *dark*

O Fusion Light e o Fusion Dark oferecem as melhores comprimentos de onda da sua classe, 755 nm de Alexandrite, 810 nm de Diodo e 1064 nm de Nd:YAG, para satisfazer a procura dos pacientes pelo procedimento número um no mundo: a depilação.

| Especificações:                    | Fusion Light                                  | Fusion Dark                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Comprimento de onda do laser:      | 755 nm y 810 nm<br>Alexandrite e Diodo        | 810 nm y 1064 nm<br>Diodo e Nd:YAG |
| Saída:                             | Mistura simultânea                            | Mistura simultânea                 |
| Tipo de pele:                      | I - IV                                        | Hasta VI                           |
| Duração do impulso:                | Curto/Longo                                   | Curto/Longo                        |
| Sistema de refrigeração integrado: | Sistema Normal de 12°<br>Sistema Strong de 7° |                                    |
| Frequência de repetição:           | Manual, 1 pps, 2 pps, deslizamento até 5 pps  |                                    |



## MAX DIOLAZE *xl*

O DiolazeXL MAX está equipado com um laser de diodo de 810 nm para tratamentos de depilação altamente eficazes e rápidos. Todos os procedimentos são confortáveis e indolores, mesmo em pêlos grossos e resistentes.

*Especificações:*

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Comprimento de onda:               | 810 nm                                          |
| Saída:                             | Diodo                                           |
| Tipo de pele:                      | I - VI                                          |
| Duração do impulso:                | Curto/Longo                                     |
| Sistema de refrigeração integrado: | Sistema Normal de 12°<br>Sistema Strong de 7°   |
| Frequência de repetição:           | Manual, 1 pps, 2 pps,<br>deslizamento até 5 pps |

## MAX VASCULAZE

Vasculaze MAX, a solução definitiva para lesões vasculares, incluindo angiomas, hemangiomas, telangiectasias, veias nas pernas e outras vascularizações benignas.


*Especificações:*

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Comprimento de               | 1064 nm (diodo) |
| Tamanho do Spot:             | 3mm x 4mm       |
| Fluência:                    | 100 - 300 J/cm² |
| Duração do impulso:          | 5 - 100 msec    |
| Refrigeração por guia de luz | 7 - 12°C        |





## ANTES E DEPOIS

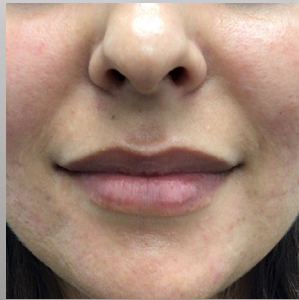

DR. S. FARHANG



INMODE



D. SEA, ITEC



DR. J. DIAMOND



K. SPECTOR, LME



DR. B. RICHLAND



SPRY SKIN & WELLNESS CENTER



DIAMOND AESTHETICS



INMODE

[WWW.INMODEMD.PT](http://WWW.INMODEMD.PT)

