

*novo*



**BODYTITE**

*by* INMODE



BODY*tite* | FACE *tite* | ACCU *tite* | MORPHEUS8

CONTORNO FACIAL E CORPORAL  
MINIMAMENTE INVASIVO

*Resultados cirúrgicos sem cicatrizes*

## ACCUTite



**Accutite** é um dispositivo minimamente invasivo altamente eficaz na remodelação e contração da pele em tratamentos localizados de pequenas áreas como pescoço, terço médio da face e áreas periorbitais, assim como em pequenas áreas do corpo como joelhos e área umbilical.

### Especificações

Comprimento da Cânula	6 cm
Diâmetro da Cânula	0,9 mm
Profundidade do Tratamento	Até 10mm, programável
Temperatura Interna	50°- 70°C ajustável
Temperatura Externa	35°- 42°C ajustável
Frequência de Saída	1 MHz

## FACEtite




**FaceTite** é uma solução completa para o contorno da face e pequenas áreas do corpo. A tecnologia permite que os médicos obtenham resultados semelhantes a um *lifting* facial ou braquioplastia, mas sem cirurgia excisional.

### Especificações

Comprimento da Cânula 1 Sensor 2 Sensores	10 cm 10 cm
Diâmetro da Cânula 1 Sensor 2 Sensores	1,8 mm 1,3 mm
Profundidade do Tratamento	Até 25 mm
Temperatura Interna	50°- 70°C ajustável
Temperatura Externa	35°- 43°C ajustável
Frequência de Saída	1 MHz

## BODYtite

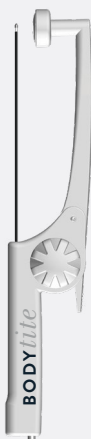

**Bodytite** permite uma lipólise superior, com resultados corporais semelhantes a procedimentos cirúrgicos mais excisionais. Através da tecnologia RFAL (Lipólise Assistida por Radiofrequência), BodyTite possibilita uma contração tridimensional sem precedentes da derme, da matriz do tecido conjuntivo subdérmico e do tecido adiposo profundo. Permite um rápido e uniforme aquecimento bipolar em toda a matriz do tecido subcutâneo. As suas medidas de segurança integradas incluem medição em tempo real da temperatura da pele, da impedância, da temperatura de corte de energia e feedback audível, que ajudam a garantir a segurança do paciente.

### Especificações

Comprimento da Cânula 1 Sensor 2 Sensores	25 cm / 17 cm / 12 cm
Diâmetro da Cânula 1 Sensor 2 Sensores	5 mm / 3,9 mm / 2,5 mm / 2,2 mm /
Profundidade do Tratamento	Até 50 mm
Temperatura Interna	50°- 70°C ajustável
Temperatura Externa	35°- 43°C ajustável
Frequência de Saída	1 MHz

# MORPHEUS8

**Morpheus8** é um dispositivo de **RF fracionada, com profundidade de penetração e intensidade de energia programáveis**, indicado para o **tratamento de irregularidades superficiais da pele**, como ridulas, rugas e cicatrizes de acne facial, e para a **celulite e contorno corporal**. Dispõe de uma gama completa de *tips*, ideal para tratamentos completos de remodelação facial e corporal. Os pins revestidos de cada *tip* penetram no tecido subdérmico e emitem uma energia de RF direcional que gera um aquecimento subnecrótico em toda a derme e subderme que contrai o tecido conjuntivo e coagula a gordura. O Morpheus8 pode ser utilizado em conjunto com as peças de mão RFAL da InMode, o que resulta na combinação perfeita para pacientes que desejem realizar uma remodelação facial e corporal que inclua o tratamento eficaz das irregularidades da superfície da pele, com resultados imediatos e que melhoram continuamente ao longo do tempo.

## PRIME

12 pins revestidos de ouro



## MORPHEUS8

24 pins revestidos de ouro



## RESURFACING

24 pins revestidos de ouro



## BODY

40 pins revestidos de ouro



### Especificações

	Prime	Morpheus8	Morpheus8 Resurfacing	Body
Zonas de tratamento	Remodelação dérmica e subdérmica de zonas precisas através de coagulação fracionada e aquecimento subnecrótico	Remodelação dérmica e subdérmica da face, pescoço e corpo	Resurfacing epidérmico da camada superficial da pele	Remodelação dérmica e subdérmica de grandes áreas corporais como abdómen, coxas e glúteos através de coagulação fracionada e aquecimento subnecrótico
Nº pins	12 (com isolante)	24 (com isolante)	24 (com isolante)	40 (com isolante)
Comprimento do pin	1-4 mm programável	1-4 mm programável	0,5 mm	2-7 mm programável
Profundidade de tratamento	1-4 mm programável	Face & protuberâncias ósseas - 2 mm Áreas faciais - 3 mm Corpo - 4 mm	0,5 mm	2-7 mm programável
Profundidade de coagulação	Até 4 mm	Até 4 mm	0,5 mm	Até 7 mm
Profundidade de aquecimento	Até 1 mm de alcance térmico adicional	Até 1 mm de alcance térmico adicional	Até 0,75 mm de alcance térmico adicional	Até 1 mm de alcance térmico adicional

## MORPHEUS8 BODY BURST




### Processo de Vulcanização por RF em 3 passos:

**DESCARGAR** – Uma poderosa explosão (*BURST*) de energia de RF é descarregada profundamente na FSN, causando uma reorientação das fibras de colagénio

**MODELAR** – A dissipação da energia de RF leva ao aquecimento em bloco dos tecidos, resultando na remodelação do colagénio e reforço da FSN

**TECER** – A energia de RF causa uma tração e entrelaçamento das fibras a nível dérmico

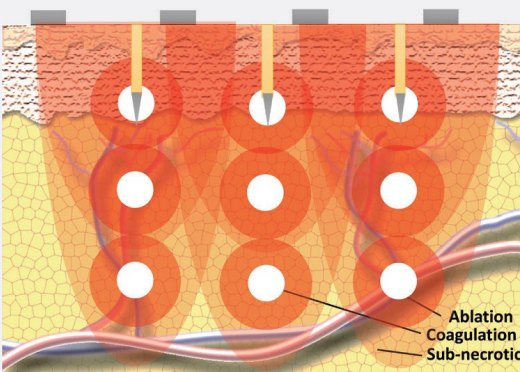

### Morpheus8 Body Burst

#### Configurações multi-pulso personalizáveis

#### Especificações

Configuração de ciclo	Ciclo de penetração multinível
7 mm	7 mm, 5 mm, 3 mm
6 mm	6 mm, 4 mm, 2 mm
5 mm	5 mm, 3 mm
4 mm	4 mm, 2 mm



# CONHEÇA O NOVO BODYtite

Se tem pacientes que desejam obter resultados excepcionais de contorno corporal e lipoescultura, sem cortes, cicatrizes ou tempo de recuperação associado à cirurgia excisional, então o novo sistema BodyTite é um ótimo investimento para a sua prática clínica.


Uma das grandes preocupações associadas às tecnologias de lipoaspiração atuais relaciona-se com a pele flácida que permanece na área lipoaspirada pós-tratamento. BodyTite dá resposta a essas preocupações, contraindo tridimensionalmente e sem precedentes, a derme, a matriz do tecido conjuntivo subdérmico e o tecido adiposo profundo.

A plataforma RFAL BodyTite, equipada com as tecnologias BodyTite, FaceTite, AccuTite e Morpheus8 proporciona uma solução completa para o contorno corporal e facial.


- Integre a plataforma BodyTite na sua prática clínica
- Atraia um leque mais diversificados de pacientes, oferecendo uma solução que não implica grandes cicatrizes e com mínimo tempo de recuperação
- Seja capaz de dar resposta a um leque de pacientes mais jovens que ainda não está disposta a um *lifting* facial, ou não querem fazer uma abdominoplastia
- Inove com a tecnologia mais avançada que existente atualmente no mercado
- Ofereça procedimentos minimamente invasivos que alcançam resultados cirúrgicos




# ANTES & DEPOIS

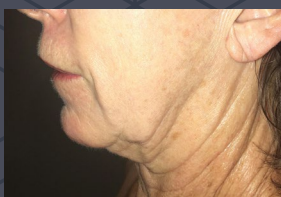


DR. C. MIZGALA

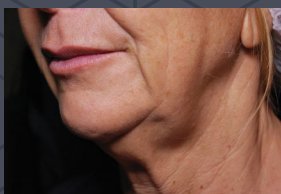


DR. P. ROVATTI

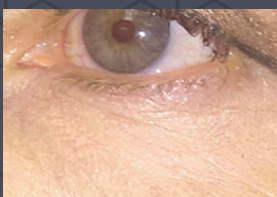



DR. T. ROMO

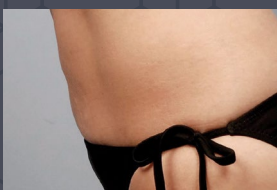

DR. S. MULHOLLAND

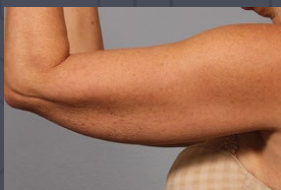


DR. D. DUNCAN

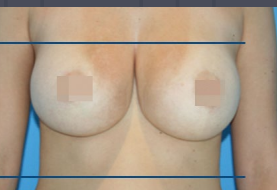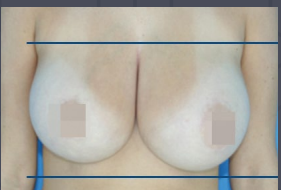

DR. G. BLUGERMAN

# RESULTADOS CLÍNICOS

Há mais de duas décadas que a InMode revoluciona a indústria da estética médica com tecnologias *state-of-art*. Atualmente, a InMode tem mais de 50 estudos e *textbooks* publicados, liderando a indústria no que respeita à excelência clínica.

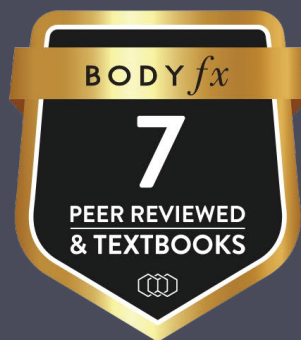

## Major Beauty Awards 2020



INMODE

WWW.INMODEMD.PT