



IGNITERF



THE INMODE ERA



IGNITERF

TECNOLOGIA APERFEIÇOADA. MAIOR CONTROLO E PRECISÃO. RESULTADO IDEAL.

A procura por tratamentos de contorno corporal por parte dos consumidores continua a ser muito elevada, com pacientes que procuram um tempo de inatividade mínimo e resultados de aspeto natural, no seu desejo de alcançar uma aparência mais jovem. IgniteRF, com avanços tecnológicos de última geração, proporciona-lhe um controlo preciso, maior funcionalidade e mais potência, permitindo-lhe oferecer os resultados incomparáveis que os seus pacientes esperam.

IgniteRF é uma solução avançada para o corpo e o rosto, indicada para procedimentos que requerem contração dos tecidos moles, eletrocoagulação, hemostasia e tratamentos que exigem níveis de penetração até 60 mm. Esta plataforma inovadora utiliza múltiplas modalidades sinérgicas que se combinam para proporcionar maior rapidez e eficácia. Com IgniteRF, pode realizar procedimentos combinados personalizados, colocando nas suas mãos um maior controlo e precisão.

Bem-vindo à Era InMode.

O PORTFÓLIO RFAL

Todas as tecnologias RFAL (Radio Frequency Assisted Lipo-coagulation) são dispositivos minimamente invasivos indicados para procedimentos de cirurgia estética nos quais é necessária a coagulação/contração dos tecidos moles ou a hemostasia.

BODYTITE

BodyTite é uma tecnologia minimamente invasiva clinicamente comprovada que utiliza RFAL. Com um único tratamento, é possível obter resultados de contração sem precedentes, anteriormente alcançados apenas através de procedimentos cirúrgicos mais extensos.

FACETITE

FaceTite é uma tecnologia avançada para o tratamento de pequenas zonas corporais. Tirando partido da potência RFAL e concebido com uma cânula não aspirativa, FaceTite permite aos médicos trabalhar no plano subdérmico com segurança e eficácia.

ACCUTITE

AccuTite é o dispositivo de RF minimamente invasivo mais pequeno da família de produtos RFAL. Trata-se de uma tecnologia avançada para o tratamento preciso de zonas delicadas. Entre os mecanismos de segurança integrados incluem-se medições em tempo real da temperatura da pele, controlo da impedância, corte de energia e feedback sonoro.

Apresentamos

BODYTITE *turbo*

BodyTite Turbo, concebido com materiais de última geração, está equipado com uma cânula mais rígida, garantindo que esta se mantém firme quando direcionada para zonas específicas do corpo. Com **mais 50% de potência** e uma **cânula 40% mais longa**, BodyTite Turbo oferece ainda mais potência, maior precisão e resultados mais rápidos.

FACETITE *turbo*

FaceTite Turbo é uma peça de mão minimamente invasiva, concebida com uma cânula rígida, que proporciona maior controlo, precisão e segurança em zonas de tecido pequenas e delicadas.



Introducing

QUANTUMRF

QuantumRF é um dispositivo revolucionário e minimamente invasivo, autorizado para utilização em procedimentos dermatológicos e de cirurgia geral nos quais é necessária a contração dos tecidos moles ou a hemostasia. Disponível em três cânulas leves, QuantumRF 25, 17 e 10, este dispositivo aplica radiofrequência fracionada (FRF) clinicamente comprovada a profundidades máximas, permitindo tratamentos personalizados adaptados às necessidades da anatomia única de cada paciente.

As peças de mão leves, revestidas a polímero e fáceis de utilizar, aplicam com precisão energia de radiofrequência bipolar pulsada no plexo subdérmico sem danificar a derme, resultando num tempo de recuperação mais curto, num menor risco de hiperpigmentação pós-inflamatória (PIH) e em procedimentos mais seguros.




QUANTUMRF25



QUANTUMRF17



QUANTUMRF10

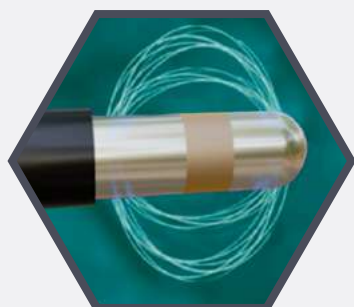



<i>Especificações</i>	25	17	10
Comprimento da cânula:	25 cm	17 cm	10 cm
Diâmetro da cânula:	3,9 mm	2,2 mm	2,2 mm
Potência máxima:	60 W	35 W	35 W
Largura máxima do pulso:	250 ms	250 ms	250 ms

IGNITERF

MAIOR CONTROLO E PRECISÃO


- » Gama completa de profundidades de tratamento para a contração dos tecidos moles, desde tratamentos superficiais de 0,5 mm até tratamentos profundos de 60 mm.
- » Os parâmetros de energia predefinidos controlam a dispersão do calor para obter resultados de tratamento ideais.
- » A distribuição controlada e uniforme da energia proporciona um aquecimento homogêneo de grandes volumes.
- » O feedback da temperatura, realizado 1.000 vezes por segundo, garante uma monitorização imediata em tempo real.
- » 100% da energia concentrada no tratamento de zonas focais protege os nervos ou estruturas periféricas.

BODYTITE *turbo*

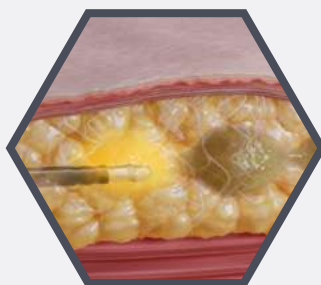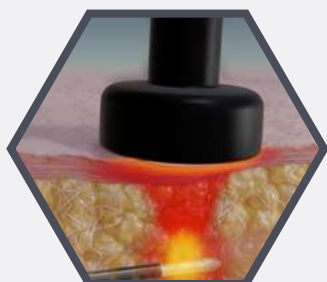

QUANTUMRF

MORPHEUS8 *burst*

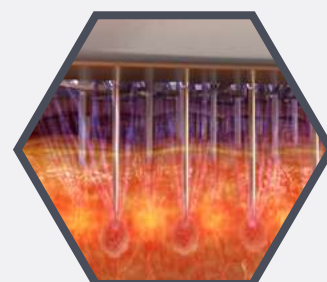



MORPHEUS8

com



MORPHEUS8 *burst*

Morpheus8 Burst é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (FRF) concebida para aplicações dermatológicas que requerem a contração/coagulação dos tecidos moles ou a hemostasia. Equipado com as funções patenteadas Burst e Scale, Morpheus8 Burst possui a capacidade única de aplicar automaticamente RF bipolar a múltiplas profundidades dos tecidos moles num único pulso, promovendo a contração tanto do tecido adiposo como do tecido dérmico. Este portfólio modular de pontas inclui Prime de 12 pinos, Morpheus8 de 24 pinos e Resurfacing de 24 pinos, permitindo oferecer tratamentos personalizados aos seus pacientes.



MORPHEUS8 *burst deep*

Morpheus8 Burst Deep é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (FRF) concebida para aplicações dermatológicas que requerem a contração/coagulação dos tecidos moles ou a hemostasia. Com capacidade para proporcionar tanto contração dérmica como contração subdérmica multinível, Morpheus8 Burst Deep proporciona os níveis mais profundos disponíveis de deposição direcionada de energia de RF, protegendo o pigmento dérmico e permitindo, simultaneamente, aplicar uma maior quantidade de energia na rede fibroseptal e no tecido adiposo.




Equipado com as funções patenteadas Burst e Scale, a ponta superficial de 40 pinos de Morpheus8 Burst Deep aplica automaticamente energia de RF bipolar, em intervalos de milissegundos, a múltiplas profundidades de tratamento e níveis de energia, num único pulso.

Especificações

	MORPHEUS8 BURST DEEP	MORPHEUS8 BURST	RESURFACING	PRIME
Profundidade Burst:	múltiplas profundidades entre 2 mm e 7 mm	dupla profundidade entre 2 mm e 5 mm		
Profundidade Scale:	múltiplas profundidades entre 2 mm e 7 mm	dupla profundidade entre 2 mm e 5 mm		
N.º de micropinos:	40	24	24	12
Perfil de profundidade:	2 mm - 7 mm	1 mm - 5 mm	0,5 mm	1 mm - 4 mm
Perfil térmico:	+1,0 mm	+1,0 mm	+0,25 mm	+1,0 mm

ANTES E DEPOIS

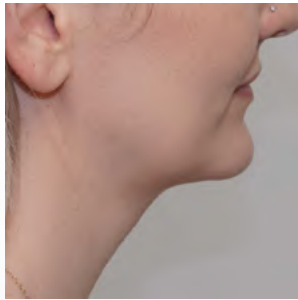

DR. M. TARAJKI




DR. J. RANIERE, JR.




DR. R. DIEPENBROCK




DR. M. LOFFREDO + DR. S. JONES

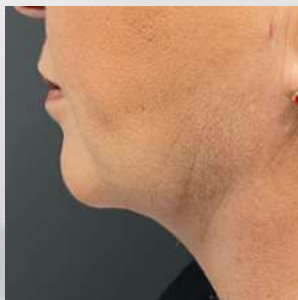



DR. Z. WILLIS

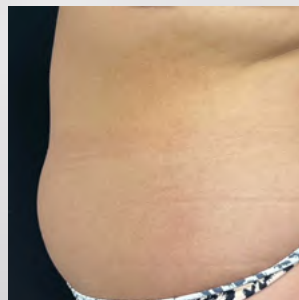

DR. P. HESTER

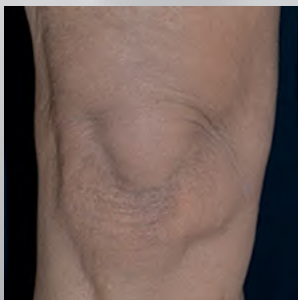

DR. P. ROVATTI

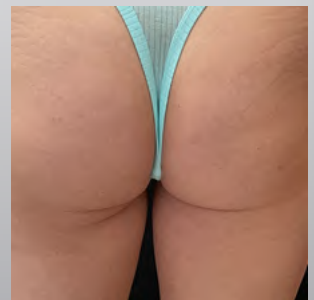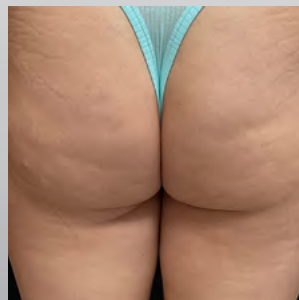

DIAMOND AESTHETICS



INMODE

WWW.INMODEMD.PT

ELLE
FUTURE OF
BEAUTY
WINNER

