



MORPHEUS *body*

Morpheus8 Body **proporciona uma remodelação profunda do tecido adiposo subdérmico até 8mm, devido à grande superfície de contacto da sua Tip, que apresenta 40 microagulhas finas revestidas a ouro, e ao perfil térmico de 7mm + 1 mm adicional. Equipado com a tecnologia de Vulcanização por RF – Modo Burst**, descarga automaticamente energia de RF bipolar em diferentes níveis de profundidade num único ciclo.



Especificações da Tip

Configuração: 40 Micropins
Profundidade: 1mm - 7mm
Perfil de Aquec.: 1mm adicional
Profundidade do Tto: Ajustável pelo operador



AVIVA

Aviva é um tratamento de última geração desenhado para eletrocoagulação e hemóstase. Esta **tecnologia minimamente invasiva** dispõe de avançados sistemas de segurança que reduzem o risco de lesão térmica durante a remodelação da matriz dos tecidos moles.

Especificações

Comprimento da cânula: 60mm
Diâmetro da cânula: 0.9mm
Temperatura interna: Ajustável pelo operador, entre 50°– 65°C
Temperatura externa: Ajustável pelo operador, até 38°C



TONE

Tone é uma tecnologia não-invasiva de **fortalecimento muscular que funciona através da descarga de pulsos elétricos de baixa frequência que produzem uma eletroestimulação muscular (EMS)** que induz contrações musculares involuntárias. **As pacientes descansam confortavelmente enquanto o Tone atua sobre grupos musculares específicos** que restauram a força abdominal, sem cirurgia ou tempo de recuperação.

Especificações:

Potência de saída: Até 50 W
Largura do impulso AMC: 20 – 400 useg
Frequência AMC: 3 – 200 Hz
AMC tempo encendio / apagado: 2 Seg.



EMPOWERRF
by INMODE

A SAÚDE DA MULHER E A OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO MULTIMILIONÁRIA

Desde o início do ciclo de vida reprodutiva, a anatomia feminina passa por uma série complexa de alterações e condições fisiológicas, que muitas vezes exigem intervenção médica e tratamento. Aproximadamente 1 em cada 3 mulheres sofrerá de SUI em algum momento das suas vidas.¹ A atrofia vaginal, ou vaginite atrófica, resulta numa disfunção sexual que afeta aproximadamente 50% das mulheres na pós-menopausa.²

O mercado global da saúde feminina foi estimado em US \$32 biliões em 2019, com um CAGR de 4,9% até 2027.³ As vendas de dispositivos baseados em energia para a saúde feminina continuam a crescer e novas tecnologias estão a emergir para dar uma melhor resposta aos problemas da saúde e do bem-estar feminino.

1. www.urologyhealth.org
2. www.shwi.org
3. Grand View Research, February 2020

AUMENTE A SATISFAÇÃO DAS SUAS PACIENTES, FAÇA CRESCER O SEU NEGÓCIO E MAXIMIZE AS SUAS RECEITAS COM O EMPOWERRF

DIGITALIZE O CÓDIGO QR PARA SABER MAIS
E VER A NOSSA GALERIA ANTES & DEPOIS



EmpowerRFMD.com



INMODE

INFOSPAIN@INMODEMD.COM | WWW.INMODEMD.PT

apresentamos



EMPOWERRF
by INMODE



v TONE | MORPHEUS v | FORMA v
MORPHEUS | MORPHEUS *body*
AVIVA | TONE

EMPOWER o
Bem-estar Feminino



GOLD STANDARD NO CUIDADO E BEM-ESTAR FEMININO

Conheça o **EmpowerRF**, uma **plataforma multifuncional que disponibiliza às mulheres terapias de bem-estar que mudam a vida**. EmpowerRF é a solução mais avançada para o cuidado íntimo que dá resposta a **uma série de condições, incluindo alterações da circulação sanguínea, alívio da dor, pavimento pélvico enfraquecido, stress, urgência e incontinência urinária mista (SUI)**.

O EmpowerRF tira o melhor partido de múltiplas energias complementares:

- **Eletroestimulação muscular intravaginal (EMS)**
- **Coagulação fracionada subepitelial**
- **Radiofrequência bipolar (RF)**

É um dispositivo programável inteligente equipado com várias peças de mão de tecnologia sinérgica. Ao contrário de outras alternativas que apresentam uma única modalidade, **a combinação de múltiplas modalidades permite personalizar os procedimentos por camadas**.

O EmpowerRF é um sistema in-office versátil e completo, desenhado para melhorar a funcionalidade e a aparência da delicada anatomia feminina. **Com EmpowerRF realizam-se tratamentos seguros, rápidos precisos e eficazes que recuperam a autoconfiança e melhoram a qualidade de vida da paciente, sem cirurgia ou tempo de recuperação prolongado.**



V TONE

A anatomia feminina sofre alterações ao longo do tempo devido a múltiplos fatores: gravidez, parto, transformações hormonais, menopausa e envelhecimento. Inevitavelmente, o pavimento pélvico ressent-se negativamente conduzindo a alterações como a incontinência urinária de esforço o que se traduz numa redução da qualidade de vida. O VTone é uma tecnologia suave e não-cirúrgica aprovada pela FDA, que está desenhada para produzir uma reeducação neuromuscular através da eletroestimulação intravaginal (EMS) para reabilitação muscular do pavimento pélvico e melhoria dos sintomas de stress, urgência e incontinência urinária mista. O aplicador de dupla face VTone introduz-se de forma rápida e confortável no canal vaginal, proporcionando o máximo de contrações. É um procedimento não-invasivo, altamente eficaz e indolor que os médicos podem realizar no seu consultório.




Especificações

- Aplicador:** Desenhado para um tratamento confortável
- Tecnologia:** Eletroestimulação muscular (EMS)
- Parâmetros de Tto:** Ajustáveis pelo operador

MORPHEUS8 V

O Morpheus8V permite uma remodelação subepitelial intravaginal. Esta tecnologia de radiofrequência fracionada dá uma resposta rápida e eficaz a uma série de cuidados íntimos internos e externos. Possui uma Tip com 24 pins (finas microagulhas revestidas a ouro), que possibilita um tratamento até 3 mm de profundidade, fazendo uso da eletrocoagulação clinicamente comprovada e do aquecimento local fracionado que induz a coagulação dos tecidos e a contração das fibras de colagénio. Indicado para ser usado em consultório, para tratamentos íntimos direcionados e precisos que anteriormente estavam associados a tratamentos cirúrgicos, mas sem anestesia geral ou tempo de recuperação.

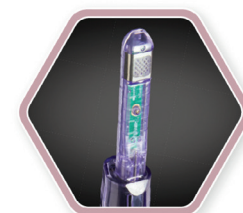

Especificações

- Configuração:** 24 micropins revestidas a ouro
- Profundidade:** 1mm - 3mm
- Perfil dos pins:** 300um de diâmetro com ponta condutora de 0.5 mm
- Profundidade do Tto:** Ajustável pelo operador

FORMA V

O FormaV é um tratamento confortável que produz um aquecimento profundo volumétrico uniforme para uma remodelação dos tecidos, com um controlo da temperatura em tempo real. A versatilidade desta tecnologia de RF permite que o médico proporcione soluções personalizadas para melhorar a saúde dos tecidos.

As pacientes normalmente veem os efeitos imediatos do tratamento e constataam uma contínua melhoria nas semanas seguintes.



Especificações

- Potência de saída de RF:** Até 40W
- Temperatura de corte:** Ajustável pelo operador, até 43 °C



MORPHEUS8

O Morpheus8 é uma tecnologia de RF fracionada para uso em procedimentos de eletrocoagulação dermatológicos e cirúrgicos em geral. A energia de RF é descarregada através de pins-elérodos bipolares que produzem um aquecimento localizado e a coagulação dos tecidos que estão em contato direto. A coagulação fracionada promove a remodelação dos tecidos, enquanto que os tecidos não tratados entre os pins promovem uma cicatrização mais rápida. O Morpheus8 pode impactar positivamente a saúde e a qualidade de vida.



Especificações das Tips:

	Prime	Morpheus8	Morpheus8 Resurfacing
Configuração	12 Micropins	24 Micropins	24 Micropins
Profundidade	1mm - 4mm	1mm - 4mm	0.5mm
Profundidade do Tto	Ajustável pelo operador	Ajustável pelo operador	Fixa

