


## ANTES E DEPOIS

### RUGAS PERIORBITAIS

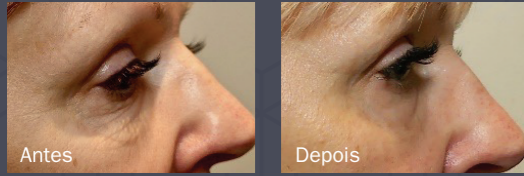

Antes Depois

DR. B. FORLEY

### FLACIDEZ ABDOMINAL



Antes Depois

DR. T. SHIMER



Antes Depois

DR. T. SHIMER


### JOELHOS



Antes Depois

DR. G. STEVENS


### FACE INTERNA DOS BRAÇOS

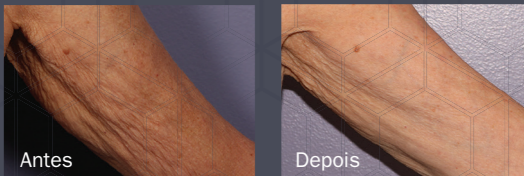

Antes Depois


DR. G. STEVENS

### TERÇO MÉDIO E INFERIOR

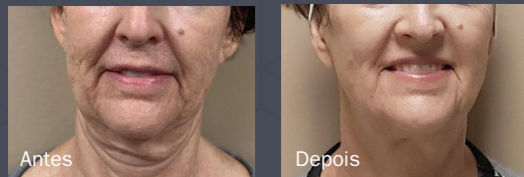

Antes Depois

DR. D. PROKUPK

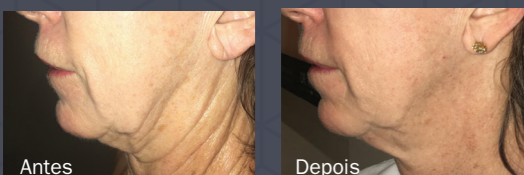

Antes Depois

DR. C. MIZGALA

## RESULTADOS CLÍNICOS COMPROVADOS

Durante mais de duas décadas, a Inmode tem revolucionado a indústria da Medicina Estética com tecnologias de última geração. A Inmode possui mais de 50 publicações revistas por pares, liderando a excelência clínica.



Todos os pacientes reapitelizaram entre 4 e 7 dias após o tratamento. Não houve casos de cicatrização retardada, nenhuma reação adversa significativa e, mais especificamente, nenhum caso de hipopigmentação pós-inflamatória (PIH) nem cicatrizes hipertróficas/hipotróficas. Fractional Ablative Radiofrequency Resurfacing In Asian And Caucasian Skin: A Novel Method For Deep Radiofrequency Fractional Skin Rejuvenation. *Journal of Cosmetic, Dermatological Sciences and Applications.*

A redução média da circunferência foi de 3,58 cm, num intervalo entre 1,5 cm e 4,4 cm. Não foi observado nenhum paciente sem resposta no estudo. A melhoria média na medição da profundidade das depressões da celulite com o sistema Vectra foi de 2,9 mm (intervalo entre 1,1 mm e 6,3 mm) ou de 60%". Introduction Of A New Non-Invasive Device For Long-Term Localized Fat Reduction And Cellulite Improvement Using Controlled, Suction Coupled, Radiofrequency Heating And High Voltage Ultra-Short Electrical Pulses. *Journal of Clinical & Experimental Dermatology Research.*

“Um único tratamento facial completo com Morpheus8 proporciona uma melhoria de mais de 50% em vários indicadores do envelhecimento da pele. Foi observada uma melhoria adicional nas rugas e na firmeza da pele na avaliação aos 6 meses em comparação com a avaliação aos 3 meses, indicando um processo de neocolagênese a longo prazo.” A Prospective Study Analyzing The Application Of Radiofrequency Energy And High-voltage, Ultrashort Pulse Duration Electrical Fields On The Quantitative Reduction Of Adipose Tissue. *Journal of Cosmetic and Laser Therapy.*



INMODE

INFOSPAIN@INMODEMD.COM | WWW.INMODEMD.PT

introducing



# MORPHEUS PRO

by INMODE




Radiofrequência fracionada de profundidade máxima para tratamentos faciais e corporais



# MORPHEUS *body*

by **INMODE**

## TECNOLOGIA 3D SMART FRAME

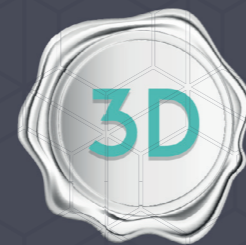

A nova **tecnologia 3D Smart Frame** está desenhada para proporcionar um **aquecimento tridimensional** massivo da derme.

Patenteada pela Inmode, esta tecnologia está disponível através da nova tip **Morpheus8 Body 3D** para tratamentos corporais mais seguros.

Nesta nova **peça de mão**, a radiofrequência bipolar é aplicada seguindo um padrão de **expansão sequencial** que começa nas microagulhas centrais e se expande em direção aos anéis médios e externos, **gerando um efeito tridimensional**.

Morpheus8 Body 3D só é possível de ser realizado com a nova neste manípulo azul Morpheus8.


A tecnologia 3D Smart Frame possui três anéis de microagulhas conectados entre si que distribuem a radiofrequência de forma sequencial.

## AQUECIMENTO TRIDIMENSIONAL

A nova tip **Morpheus8 Body 3D** integra a tecnologia **3D Smart Frame**.

A energia de radiofrequência é emitida sequencialmente para os três grupos de microagulhas (verdes, laranjas e azuis). Além disso, a energia é ajustada para compensar a distância e o número de agulhas em cada anel, e é distribuída tendo em consideração a profundidade, o comprimento e a distância entre as agulhas.

### Padrão de expansão sequencial

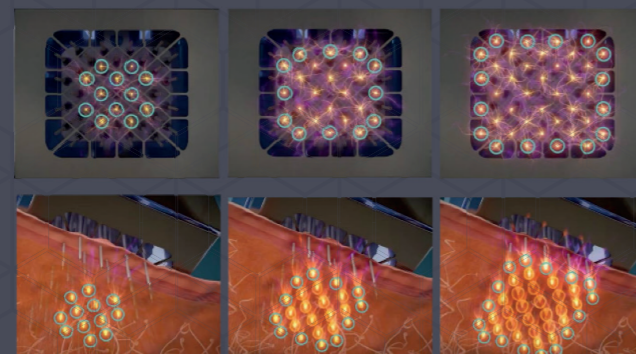

# MORPHEUS PRO




## VANTAGENS

- Dois manípulos: Morpheus8 para tratamentos faciais e Morpheus8 3D para tratamentos corporais.
- Penetração programada de 0,5mm até 7mm na dermis.
- Apresenta 4 tipos de microagulhas de uso único: 12, 24, Resurfacing e Body.
- Tip de 40 microagulhas com a tecnologia Burst e design exclusivo.
- Seguro em todos os fototipos, com mínimo risco de hiperpigmentação pós-inflamatória.
- Dano mínimo na epiderme.

Desenhados para se adaptarem a qualquer zona anatômica nos tratamentos de remodelação facial e corporal:

### PRIME

12 microagulhas revestidas a ouro

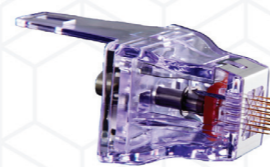

### MORPHEUS8

24 microagulhas revestidas a ouro



### RESURFACING

24 microagulhas revestidas a ouro



### BODY

40 microagulhas revestidas a ouro



## ESPECIFICAÇÕES

	Prime	Morpheus8	Morpheus8 Resurfacing	Body
<b>Zonas de tratamento</b>	Remodelação dérmica e subdérmica de zonas onde se requer uma maior precisão	Remodelação dérmica e subdérmica da face, pescoço e corpo	Reepiteliza a camada superficial da pele	Remodelação dérmica e subdérmica de grandes áreas corporais como o abdômen, coxas e glúteos
<b>Nº Microagulhas (MA)</b>	12	24	24	40
<b>Comprimento das MA</b>	1 - 4mm programável	1 - 4mm programável	0,5mm fixo	2 - 7mm programável
<b>Profundidade do tratamento</b>	1 - 4mm programável	Áreas faciais 2-3mm Áreas corporais 4mm	0,5mm	2 - 7mm programável
<b>Profundidade de aquecimento</b>	Até 1mm de perfil térmico adicional	Até 1mm de perfil térmico adicional	Até 0,25mm de perfil térmico adicional	Até 1mm de perfil térmico adicional
<b>Modo de trabalho</b>	Fixed e Cycle	Fixed e Cycle	Fixed	Fixed, Cycle e Burst

## NOVA PLATAFORMA MORPHEUSPRO PARA TRATAMENTOS DE REMODELAÇÃO SUBDÉRMICA DE PROFUNDIDADE MÁXIMA

Primeira e única plataforma aprovada pela FDA e suportada por múltiplos estudos clínicos que combina radiofrequência fracionada com diferentes níveis de penetração programável para tratamentos de remodelação corporal e facial minimamente invasivos.

Morpheus8 é uma **tecnologia de última geração, sem concorrência, e a mais popular do mercado**, com mais de um milhão de procedimentos realizados em todo o mundo.

Morpheus8 é um **tratamento minimamente invasivo, com um tempo mínimo de recuperação e sem vermelhidão prologada ou efeitos secundários**.

