
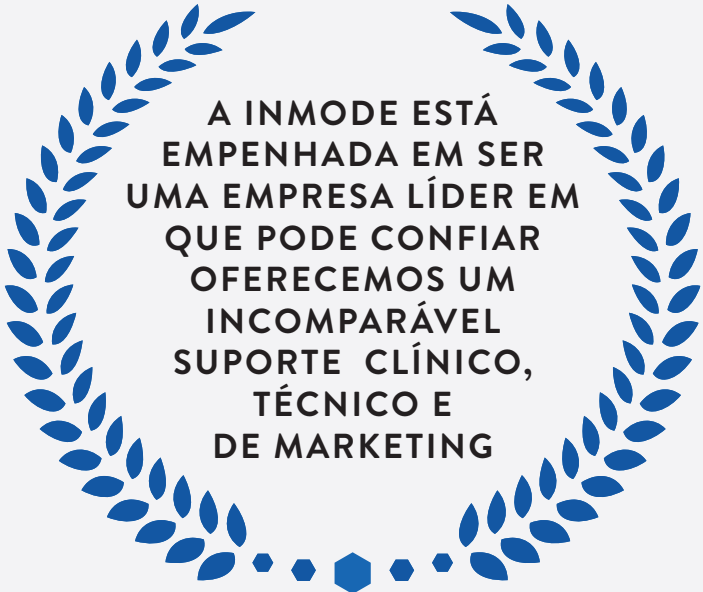


AUMENTE A SATISFAÇÃO
DOS SEUS PACIENTES, FAÇA CRESCER
O SEU NEGÓCIO E MAXIMIZE A
SUA RENTABILIDADE COM **ENVISION**

ANTES & DEPOIS

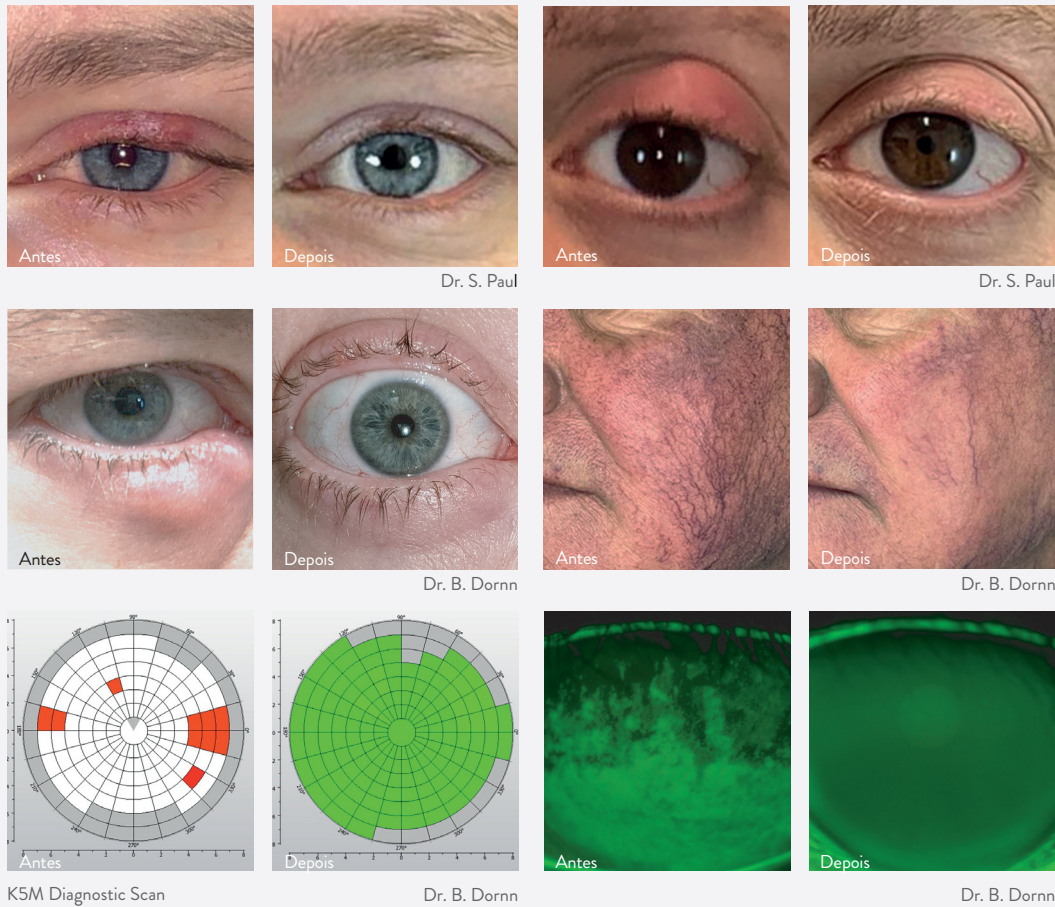

WWW.INMODEMD.PT

VSBNV0423US

apresentamos



ENVISION
by INMODE



FORMA I | LUMECCA I
MORPHEUS 8

Tratamentos de Precisão dos Tecidos



ENVISION

UMA NOVA ALTERNATIVA NÃO CIRÚRGICA E NÃO MEDICAMENTOSA



Envision é a nova plataforma de **referência para clínicas** que revoluciona os procedimentos em áreas delicadas. Este dispositivo inovador, **não cirúrgico**, utiliza várias modalidades programáveis que funcionam em sinergia para proporcionar **tratamentos de precisão**:

- **Forma-I:** radiofrequência bipolar (RF)
- **Lumecca-I:** luz pulsada intensa (IPL)
- **Morpheus8:** tecnologia de RF fracionada minimamente invasiva

Os aplicadores de pequenas dimensões do Envision e o **controle preciso da profundidade** permitem procedimentos seguros e altamente eficazes nas camadas subdérmicas da pequena e delicada região periorbital. Com Envision, os médicos podem realizar procedimentos não medicamentosos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

FORMA I

TRATAMENTOS DE PRECISÃO DOS TECIDOS

Forma-I é certificado pela Health Canada para tratar os sintomas da doença do olho seco causada pela Disfunção das Glândulas Meibomianas (DGM). Foi desenhado para ser utilizado na zona periorbital e nas pálpebras para aliviar a inflamação das glândulas meibomianas e a irritação ocular*. Forma-I foi aprovado pela FDA para a melhoria temporária da circulação sanguínea local. Forma-I é uma tecnologia térmica inovadora concebida para fornecer energia de radiofrequência bipolar a pequenas zonas delicadas. A sua peça de mão, de tamanho compacto, atinge temperaturas ótimas para tratamento de até 43°C, proporcionando um aquecimento profundo volumétrico confortável, preciso e uniforme. Com um perfil de segurança sem precedentes, o pequeno aplicador Forma-I permite um controlo preciso da profundidade da RF e uma monitorização inteligente da epiderme através de um feedback contínuo, constituindo uma alternativa não medicamentosa segura.

Especificações:

Eléttodos:	2 @ 4mm x 12mm
Área de tratamento:	144 mm²
Temperatura de Corte:	Ajustável pelo utilizador, até 43°C
Frequência de saída:	1 Mhz



LUMECCA I

LUZ PULSADA INTENSA (IPL)

O Lumecca está aprovado pela FDA para o tratamento de lesões epidérmicas pigmentadas benignas e lesões vasculares cutâneas benignas. O Lumecca, com o adaptador Lumecca-I, proporciona procedimentos de luz pulsada precisos, focalizados para tratar condições inflamatórias em zonas mais pequenas. Otimizado para tons de pele I-IV, o Lumecca foi desenvolvido com uma lâmpada de flash de xénon avançada que produz 40% da energia total do pulso entre os 500-600 nm. A energia IPL penetra na pele e é seletivamente absorvida pelos cromóforos da lesão (melanina ou hemoglobina). A energia absorvida é convertida em calor, coagulando seletivamente as lesões, que desaparecem algumas semanas após o tratamento. Cada vez mais, a IPL tem demonstrado em estudos clínicos ter um efeito positivo em pacientes com DGM e olhos secos.^{1,2}

Especificações:

Comprimento de onda: 580 SR	580-1200nm
Tamanho do spot 515 / 580	8mm
Tamanho do spot:	30mm x 10mm
Fluência:	5-30 J/cm²
Duração do pulso:	1,5 - 15 msec
Luz guia do arrefecimento:	15 - 22°C
Taxa de repetição:	1 pps

*Indicações de utilização certificadas pela Health Canada

1. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). Intense Pulsed Light therapy for Meibomian Gland Dysfunction: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines
2. Dell, S.J., Clinical Ophthalmology. Intense Pulsed Light therapy for Evaporative Dry Eye Disease.

Aviso: O paciente e o prestador de cuidados de saúde devem usar sempre óculos de proteção quando utilizam o Lumecca. Não tratar sobre o globo ocular.

MORPHEUS8



MODULAR FRACTIONAL PORTFOLIO OF TIPS

Morpheus8 é uma tecnologia de RF fracionada minimamente invasiva para procedimentos dermatológicos e cirúrgicos gerais de eletrocoagulação e hemóstase. Trata-se de uma tecnologia fracionada clinicamente comprovada, concebida para tratar tecidos. A energia de RF é fornecida a várias profundidades de tratamento através de matrizes bipolares com microagulhas (pins) que produzem um aquecimento localizado e a coagulação do tecido. A coagulação fracionada promove a produção de colagénio, enquanto o tecido não tratado entre os pins promove uma cicatrização mais rápida.

O Morpheus8 possui uma gama de tips de microagulhas com diferentes configurações de pins e intercambiáveis (Prime-12 pins, Resurfacing-24 pins e Subdermal-24 pins), proporcionando uma solução modular aos médicos.



PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DO MORPHEUS8

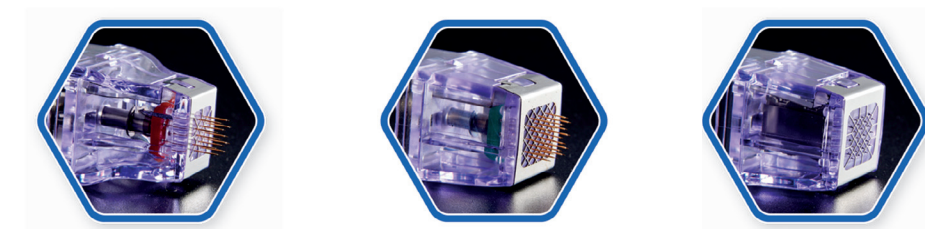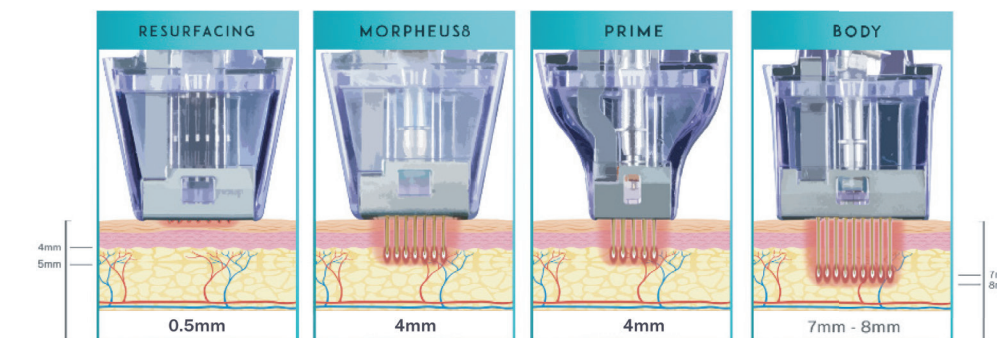

Especificações das tips:

	PRIME	MORPHEUS8	RESURFACING
Configuração:	12 Micropins	24 Micropins	24 Micropins
Profundidade:	1 - 4mm	1 - 4mm	0,5mm
Perfil de aquecimento adicional:	+1mm	+1mm	+0,25mm
Profundidade do tratamento:	Ajustável pelo utilizador	Ajustável pelo utilizador	Fixo