



APEXRF



THE INMODE ERA



APEXRF

TECNOLOGIA DE CONFIANÇA
TRATAMENTOS DE PRECISÃO
RESULTADOS EFICAZES

As clínicas e os pacientes solicitam as tecnologias da InMode pelo nome. A InMode é sinónimo de liderança em inovação e foi concebida para elevar os resultados clínicos a um novo nível. Com base em tecnologias amplamente comprovadas, continuamos a expandir o nosso portfólio para o ajudar a oferecer tratamentos avançados e resultados excecionais aos seus pacientes.

ApexRF é uma alternativa não cirúrgica, realizada em consultório, que está a transformar os tratamentos de saúde íntima masculina. Graças à combinação dos seus diferentes manípulos, oferece um controlo preciso da temperatura e da profundidade de tratamento, permitindo procedimentos seguros e altamente eficazes nas camadas subdérmicas de pequenas áreas de tecido.

Com a ApexRF, os médicos podem realizar tratamentos personalizados concebidos para restaurar a confiança do paciente e melhorar a sua qualidade de vida.

Bem-vindo à Era InMode.



Apresentamos

APEX *circulatory*

TRATAMENTOS DE TECIDO DE PRECISÃO

Apex Circulatory é uma tecnologia térmica avançada indicada para a melhoria da circulação sanguínea local. Foi concebida para administrar energia de radiofrequência bipolar (RF) dirigida a zonas delicadas. O seu design exclusivo e o aplicador com ponta rotativa atingem rapidamente temperaturas ótimas de tratamento até 43 °C. O Apex Circulatory foi desenvolvido com níveis de segurança sem precedentes, controlo preciso da profundidade da RF e um sistema inteligente de monitorização epidérmica com feedback contínuo. Realizado em consultório, este procedimento não invasivo oferece aos pacientes uma alternativa confortável.

Especificações:

Número de eletrodos:	3
Corte de temperatura:	ajustável pelo operador até 43°C
Frequência de saída:	1 MHz



TONE

TRATAMENTO DE TONIFICAÇÃO MUSCULAR

Tone é uma tecnologia não invasiva de fortalecimento muscular que emite impulsos de baixa frequência para proporcionar estimulação muscular elétrica (EMS) e induzir contrações musculares involuntárias. Os pacientes repousam confortavelmente enquanto o Tone atua sobre grupos musculares específicos para restaurar a força muscular. Este procedimento autónomo e de mãos livres permite à sua clínica oferecer planos de tratamento personalizados.



Especificações:

Potência de saída:	Até 50 W
Largura do pulso AMC:	20 - 400 useg
Frequência AMC:	3 - 200 Hz
Tempo ligado/ desligado do AMC:	2 seg

MORPHEUS8

con




MORPHEUS8 *burst*

Morpheus8 Burst é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (FRF) destinada a aplicações dermatológicas que requerem contração de tecido mole ou hemostase.

Equipado com as funcionalidades patenteadas Burst e Scale, o Morpheus8 Burst tem a capacidade única de, num único pulso, distribuir automaticamente radiofrequência bipolar a múltiplas profundidades do tecido mole, contraindo tanto o tecido adiposo como o tecido dérmico.

Este portefólio modular de tips, que inclui Prime de 12 micropinos, Morpheus8 de 24 micropinos e Resurfacing de 24 micropinos, permite oferecer resultados sem precedentes aos pacientes.

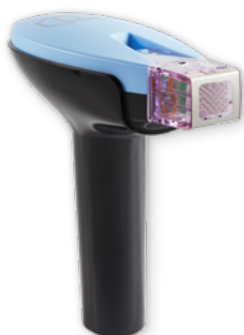

MORPHEUS8 *burst deep*

Morpheus8 Burst Deep é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (FRF) destinada a aplicações dermatológicas que requerem contração de tecido mole ou hemostase.

Grças à sua capacidade de proporcionar contração profunda multinível do tecido mole e contração dérmica, o Morpheus8 Burst Deep oferece os níveis mais profundos de deposição de energia de RF dirigida disponíveis, protegendo o pigmento dérmico e permitindo, ao mesmo tempo, uma maior entrega de energia ao FSN e ao tecido adiposo.

Equipado com as funcionalidades patenteadas Burst e Scale, o tip superficial de 40 micropinos do Morpheus8 Burst Deep distribui automaticamente energia de RF bipolar, em intervalos de milissegundos, a múltiplas profundidades e níveis de energia num único pulso.

Especificações:

	MORPHEUS8 DEEP	MORPHEUS8	RESURFACING	PRIME
Profundidade Burst:	Múltiplas profundidades: 2-7 mm	Dupla profundidade: 2-5 mm		
Profundidade Scale:	Múltiplas profundidades: 2-7 mm	Dupla profundidade: 2-5 mm		
Nº de Micropins:	40	24	24	12
Perfil de profundidade:	2mm - 7mm	1mm - 5mm	0.5mm	1mm - 4mm
Perfil térmico:	+1.0mm	+1.0mm	+0.25mm	+1.0mm

“

ApexRF está na vanguarda da mudança na forma como tratamos os problemas circulatórios,

com uma nova alternativa não cirúrgica, não invasiva e sem fármacos que melhora de forma efetiva a função natural. Esta solução sem tempo de inatividade melhora de forma rápida e indolor o fluxo sanguíneo para restaurar a confiança na vida dos meus pacientes. Os primeiros estudos clínicos e a experiência na prática real demonstraram melhorias perceptíveis.”

”

Robert J. Valenzuela, MD, FACS
Urologista protésico e geral



A APEXRF OTIMIZA A SATISFAÇÃO DO PACIENTE E DIVERSIFICA AS RECEITAS DA SUA CONSULTA

Os problemas de circulação sanguínea estão entre as afeções mais comuns que afetam o bem-estar masculino, especialmente em homens dos 40 aos 70 anos.¹ Ofereça aos seus pacientes uma nova alternativa não farmacológica e não cirúrgica com a ApexRF.

1. <https://courses.lumenlearning.com/suny-ap2/chapter/anatomy-and-physiology-of-the-male-reproductive-system>



INMODE

WWW.INMODEMD.PT

VSBAPX1125