



LUXORA



THE INMODE ERA



LUXORA

TECNOLOGIA REFINADA CONTROLO MELHORADO RESULTADOS EXCECIONAIS

A procura dos pacientes por tratamentos de contorno facial continua em máximos históricos, impulsionada por alterações no estilo de vida, pelo envelhecimento da população e pelo aumento do número de pacientes com pele flácida e descaída devido à perda de peso associada à utilização crescente de medicamentos GLP-1. Os pacientes procuram tempos de recuperação mínimos e resultados de aspeto natural, com o objetivo de alcançar traços definidos e uma aparência mais jovem. Luxora é uma solução facial integral, tudo-em-um, que tira partido de tecnologias sinérgicas para proporcionar a contração dos tecidos moles através de radiofrequência fracionada clinicamente comprovada. O seu design multimodal oferece uma versatilidade incomparável, permitindo aos profissionais tratar pacientes que podem não ser candidatos ideais a procedimentos cirúrgicos tradicionais, mas que ainda assim desejam resultados visíveis com um tempo de recuperação mínimo.

Com Luxora, pode realizar com total confiança tratamentos faciais personalizados e minimamente invasivos diretamente na sua clínica, sem necessidade de bloco operatório. Proporcione, de forma segura e eficiente, os resultados excepcionais que os seus pacientes esperam no seu processo de transformação.

Bem-vindo à Era InMode.

Apresentamos

QUANTUM RF 10


CONTRAÇÃO PRECISA DOS TECIDOS MOLES

QuantumRF 10 é um dispositivo de última geração e minimamente invasivo, autorizado para utilização em procedimentos dermatológicos e de cirurgia geral que exijam a contração dos tecidos moles.

Graças à tecnologia de radiofrequência, com eficácia clinicamente comprovada, atua de forma precisa e segura em zonas faciais delicadas, a profundidades personalizáveis, sem danificar a derme.

A cânula revestida a polímero do QuantumRF 10, de utilização simples, aplica energia de radiofrequência (RF) bipolar pulsada e controlada ao plexo subdérmico, promovendo a contração dos tecidos e reduzindo o tempo de recuperação do paciente.

Concebido para utilização em clínica, o QuantumRF 10 proporciona resultados excepcionais sem necessidade de bloco operatório.

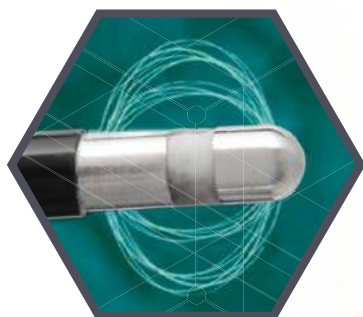

Especificações:

Comprimento da cânula:		10 cm
Diâmetro da cânula:		2,2 mm
Potência de pico:		35 W
Largura máxima do pulso:		250 ms





FACETITE *turbo*

FaceTite Turbo é uma peça de mão minimamente invasiva, concebida com uma cânula rígida que proporciona maior controlo, precisão e segurança em zonas de tecido pequenas e delicadas.



FACETITE

FaceTite é uma tecnologia avançada para o tratamento de pequenas zonas corporais. Tirando partido da energia RFAL e do seu design com uma cânula não aspirante com ponta de plástico, FaceTite permite aos profissionais médicos trabalhar no plano subdérmico de forma segura e eficaz.



ACCUTITE

AccuTite é o dispositivo de radiofrequência minimamente invasivo mais pequeno da gama de produtos RFAL. É uma tecnologia avançada para o tratamento preciso de zonas delicadas. Os sistemas de segurança integrados incluem a medição em tempo real da temperatura da pele, a monitorização da impedância, a interrupção automática da energia e alertas sonoros.





MORPHEUS8

com



MORPHEUS8 *burst*



Morpheus8 Burst é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (RFF) destinada a aplicações dermatológicas que requeiram a contração ou coagulação dos tecidos moles ou a obtenção de hemostase. Graças às suas funções exclusivas Burst e Scale, Morpheus8 Burst tem a capacidade única de aplicar automaticamente, num único pulso, radiofrequência bipolar a diferentes níveis de profundidade dos tecidos moles, promovendo a contração tanto do tecido adiposo como do tecido dérmico. Esta gama modular de ponteiros, que inclui Prime de 12 microagulhas, Morpheus8 de 24 microagulhas e Resurfacing de 24 microagulhas, permite proporcionar resultados incomparáveis aos seus pacientes.

Especificações:

	MORPHEUS8	RESURFACING	PRIME
Profundidade Burst:	Dupla profundidade entre 2 mm e 5 mm		
Profundidade Scale:	Dupla profundidade entre 2 mm e 5 mm		
Número de microagulhas:	24	24	12
Perfil de profundidade:	1 mm - 5 mm	0,5 mm	1 mm - 4 mm
Perfil térmico:	+1,0 mm	+0,25 mm	+1,0 mm

FORMA

TRATAMENTO TÉRMICO FACIAL

Forma é uma tecnologia térmica inovadora que aplica energia de radiofrequência bipolar de forma seletiva nas camadas dérmica e subdérmica, permitindo realizar procedimentos não invasivos e indolores. Os termístores de radiofrequência com ajuste automático, integrados numa peça de mão fácil de utilizar, medem a temperatura da pele 1 000 vezes por segundo, permitindo atingir temperaturas uniformes e ideais até 43 °C. O sistema inteligente de monitorização epidérmica de Forma, com feedback contínuo, proporciona aos pacientes tratamentos confortáveis, seguros e eficazes.

Especificações:

Número de elétrodos:	3
Dimensão da área de aplicação:	2,2 cm × 2,5 cm
Limite de temperatura:	Ajustável pelo operador até 43 °C
Frequência de saída:	1 MHz



ANTES E DEPOIS

QUANTUMRF10



DR. E. DAYAN



DR. T. MANINGAS

FACETITE



DR. M. TARAJKI



DR. R. MALHOTRA

MORPHEUS8 *burst*



K. DONNAY DNP, FNP-C



R. CHENIER, PA-C

FACETITE *turbo*



DR. Z. WILLIS




DR. R. DIEPENBROCK

FORMA



DR. B. RIDENOUR

ACCUTITE

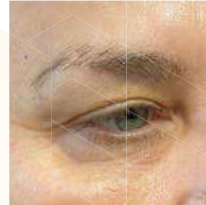

DR. R. DIEPENBROCK



INMODE

WWW.INMODEMD.PT

VSBLUX1125