



LUXORA



THE INMODE ERA



LUXORA

TECNOLOGIA REFINADA CONTROLO MELHORADO RESULTADOS EXCECIONAIS

A procura dos pacientes por tratamentos de contorno facial continua em máximos históricos, impulsionada por mudanças no estilo de vida, pelo envelhecimento da população e pelo aumento de pacientes com pele flácida e laxidão devido à perda de peso associada ao uso crescente de medicamentos GLP-1. Os pacientes procuram tempos de recuperação mínimos e resultados de aspeto natural no seu desejo de alcançar traços definidos e uma aparência mais jovem. A Luxora é uma solução facial integral, tudo-em-um, que aproveita tecnologias sinérgicas para proporcionar contração de tecidos moles através de radiofrequência fracionada clinicamente comprovada. O seu design multimodal oferece uma versatilidade incomparável, permitindo aos profissionais tratar pacientes que podem não ser candidatos ideais para procedimentos cirúrgicos tradicionais, mas que, ainda assim, pretendem resultados visíveis com um tempo de inatividade mínimo.

Com a Luxora, pode realizar com total confiança tratamentos faciais personalizados e minimamente invasivos diretamente no seu consultório, sem necessidade de bloco operatório. Ofereça de forma segura e eficiente os resultados excepcionais que os seus pacientes esperam no seu processo de transformação.

Bem-vindo à Era InMode.



Apresentamos


QUANTUMRF10

CONTRAÇÃO PRECISA DO TECIDO MOLE

O QuantumRF10 é um dispositivo de vanguarda, minimamente invasivo, aprovado para utilização em procedimentos dermatológicos e de cirurgia geral que requerem contração de tecidos moles. Com base em tecnologia de radiofrequência clinicamente comprovada, permite tratar de forma precisa e segura áreas como: pescoço, definição do contorno mandibular/oval facial ou zonas corporais localizadas, como braços, abdômen, flancos, joelhos, face interna das coxas, etc., sem danificar a derme. A cânula de polímero, fácil de utilizar, administra energia de radiofrequência bipolar pulsada de forma controlada ao plexo subdérmico, promovendo a contração dos tecidos com menor tempo de recuperação para o paciente. Concebido para uso em consultório, o QuantumRF 10 oferece resultados excepcionais sem necessidade de bloco operatório.

Especificações:

Comprimento da cânula:	10 cm
Diâmetro da cânula:	2.2 mm
Potência:	35 W
Largura máxima de pulso:	250 ms

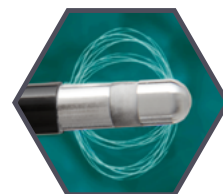

FORMA

TRATAMENTO TÉRMICO DO TECIDO

Forma é uma tecnologia térmica inovadora que aplica energia de radiofrequência bipolar dirigida às zonas dérmicas e subdérmicas, oferecendo procedimentos não invasivos e indolores. Os termístores de RF autoajustáveis integrados no aplicador, fácil de utilizar, medem a temperatura da pele 1.000 vezes por segundo, permitindo que o tratamento atinja temperaturas uniformes e ótimas até 43 °C. O sistema inteligente de monitorização epidérmica da Forma, com feedback contínuo, proporciona tratamentos confortáveis, seguros e eficazes.

Especificações:

Número de elétrodos:	3
Tamanho do spot do aplicador:	2.2 cm x 2.5 cm
Corte de temperatura:	Ajustável pelo operador até 43 °C
Frequência de saída:	1 MHz







MORPHEUS8

with




MORPHEUS8 *burst*



Morpheus8 Burst é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (FRF) destinada a aplicações dermatológicas que requerem contração/coagulação de tecidos moles ou hemostase. Equipado com as funcionalidades patenteadas Burst e Scale, o Morpheus8 Burst tem a capacidade única, num único pulso, de distribuir automaticamente radiofrequência bipolar a múltiplas profundidades do tecido mole, contraindo tanto o tecido adiposo como o tecido dérmico. Este portefólio modular de tips, que inclui Prime de 12 micropinos, Morpheus8 de 24 micropinos e Resurfacing de 24 micropinos, permite oferecer resultados sem precedentes aos pacientes.

MORPHEUS8 *burst deep*

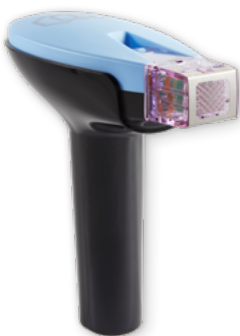


Morpheus8 Burst Deep é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (FRF) destinada a aplicações dermatológicas que requerem contração/coagulação de tecidos moles ou hemostase. Com a capacidade de proporcionar tanto contração profunda multinível do tecido mole como contração dérmica, o Morpheus8 Burst Deep oferece os níveis mais profundos de deposição de energia de RF dirigida disponíveis, protegendo o pigmento dérmico e permitindo, ao mesmo tempo, uma maior entrega de energia ao FSN e ao tecido adiposo. Equipado com as funcionalidades patenteadas Burst e Scale, o tip superficial amplo de 40 micropinos do Morpheus8 Burst Deep distribui automaticamente energia de radiofrequência bipolar, em intervalos de milissegundos, a múltiplas profundidades e níveis de energia num único pulso.

<i>Especificações:</i>	MORPHEUS8 DEEP	MORPHEUS8	RESURFACING	PRIME
Profundidade Burst:	Múltiplas profundidades: 2-7 mm	Dupla profundidade: 2-5 mm		
Profundidade Scale:	Múltiplas profundidades: 2-7 mm	Dupla profundidade: 2-5 mm		
Nº de Micropins:	40	24	24	12
Perfil de profundidade:	2mm - 7mm	1mm - 5mm	0.5mm	1mm - 4mm
Perfil térmico:	+1.0mm	+1.0mm	+0.25mm	+1.0mm

ANTES E DEPOIS

QUANTUMRF10

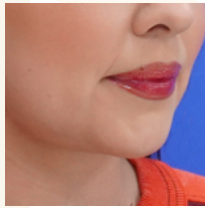

DR. E. DAYAN



DR. F. HAMADANI




DR. T. MANINGAS



DR. E. DAYAN

MORPHEUS8 *burst*

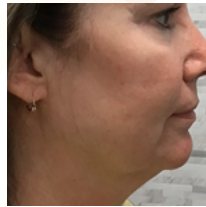



K. DONNAY DNP, FNP-C



J. MURPHY, RN




R. CHENIER, PA-C

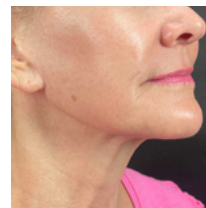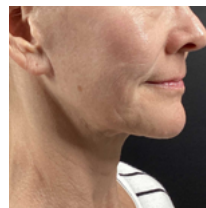

ESMÉ MEDSPA

FORMA

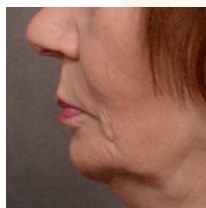

DR. B. RIDENOUR



SHULZ BEAUTY & BODY



WWW.INMODEMD.PT

VSBLUX1125