


BURST
MORPHEUS8 PRO



THE INMODE ERA

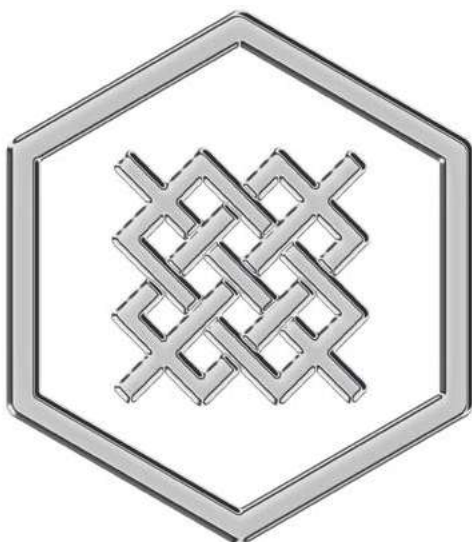

BURST MORPHEUS8 PRO



A EVOLUÇÃO DA RADIOFREQUÊNCIA FRACIONADA

Morpheus8 PRO BURST reúne as tecnologias de radiofrequência fracionada mais avançadas da InMode numa única plataforma especializada para a remodelação completa do rosto e do corpo.

Ao combinar a precisão de Morpheus8 Burst, as capacidades de remodelação profunda de Morpheus8 Burst Deep e a tecnologia térmica inteligente de Forma, Morpheus8 PRO BURST permite aos médicos personalizar os tratamentos a múltiplas profundidades dos tecidos, com precisão, eficiência e controlo excecionais.

Desde o rejuvenescimento superficial até à remodelação profunda dos tecidos e à reafirmação térmica não invasiva, os tratamentos podem ser adaptados à anatomia e aos objetivos estéticos únicos de cada paciente, tudo a partir de uma única plataforma versátil.

PORQUÊ MORPHEUS8 PRO BURST?

- Uma plataforma específica para uma remodelação completa através de radiofrequência
- Tecnologias de radiofrequência fracionada e térmica não invasiva
- Protocolos de tratamento personalizados
- Versatilidade para rosto e corpo
- Múltiplas profundidades de tratamento
- Fornecimento inteligente de energia
- Tecnologias clinicamente comprovadas

UMA PLATAFORMA. TRÊS TECNOLOGIAS.

MORPHEUS8 *burst*



Morpheus8 Burst é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (FRF) destinada a aplicações dermatológicas que requerem a contração ou coagulação dos tecidos moles ou a hemostasia.

Equipado com as funções patenteadas «Burst» e «Scale», Morpheus8 Burst possui a capacidade única de aplicar automaticamente, num único pulso, radiofrequência bipolar a diferentes níveis de profundidade nos tecidos moles, promovendo a contração tanto do tecido adiposo como do tecido dérmico.

Esta gama modular de pontas, que inclui Prime de 12 pinos, Morpheus8 de 24 pinos e Resurfacing de 24 pinos, permite oferecer resultados incomparáveis aos seus pacientes.

MORPHEUS8 *burst deep*



Morpheus8 Burst Deep é uma tecnologia de radiofrequência fracionada (FRF) destinada a aplicações dermatológicas que requerem a contração ou coagulação dos tecidos moles ou a hemostasia.

Graças à sua capacidade de provocar uma contração profunda e multinível dos tecidos moles, Morpheus8 Burst Deep proporciona os níveis mais profundos disponíveis de deposição direcionada de energia de RF, protegendo a epiderme e permitindo, simultaneamente, aplicar uma maior quantidade de energia à camada subepidérmica (FSN) e ao tecido adiposo.

Equipado com as tecnologias patenteadas Burst e Scale, a ampla ponta superficial de 40 pinos de Morpheus8 Burst Deep aplica automaticamente energia de radiofrequência bipolar, em intervalos de milissegundos, a diferentes profundidades de tratamento e níveis de energia, num único pulso.


MORPHEUS8 *burst*

Especificações	MORPHEUS8 DEEP	MORPHEUS8	RESURFACING	PRIME
Profundidade Burst:	múltiplas profundidades entre 2 mm e 7 mm	dupla profundidade entre 2 mm e 5 mm		
Profundidade Scale:	múltiplas profundidades entre 2 mm e 7 mm	dupla profundidade entre 2 mm e 5 mm		
N.º de micropinos:	40	24	24	12
Perfil de profundidade:	2 mm - 7 mm	1 mm - 5 mm	0,5 mm	1 mm - 4 mm
Perfil térmico:	+1,0 mm	+1,0 mm	+0,25 mm	+1,0 mm



FORMA



Forma é uma tecnologia térmica inovadora que aplica seletivamente energia de radiofrequência bipolar nas camadas dérmicas e subdérmicas. Equipada com um sistema inteligente de monitorização epidérmica, proporciona tratamentos não invasivos e indolores, seguros e eficazes.

Os termístores de radiofrequência integrados, com ajuste automático, medem a temperatura da pele 1.000 vezes por segundo, permitindo que o tratamento atinja temperaturas ideais clinicamente comprovadas.

<i>Especificações:</i>	FORMA
N.º de elétrodos:	3
Tamanho do spot:	2,2 cm x 2,5 cm
Temperatura de corte:	ajustável pelo operador até 43 °C
Frequência de saída:	MHz

REMODELAÇÃO COMPLETA

Morpheus8 PRO BURST permite aos médicos tratar todas as camadas dos tecidos através de uma única plataforma integrada de radiofrequência.

Desde o rejuvenescimento epidérmico até à remodelação dos tecidos profundos e à reafirmação térmica não invasiva, cada tecnologia complementa as restantes para facilitar estratégias de tratamento personalizadas, tanto no rosto como no corpo.

UMA PLATAFORMA. TRÊS TECNOLOGIAS.



FORMA



MORPHEUS8

burst



MORPHEUS8

burst deep

A PLATAFORMA COMPLETA DE RF FRACIONADA

Há mais de duas décadas que a InMode impulsiona a inovação no âmbito da estética médica através de tecnologias clinicamente comprovadas.

Apoiadas por mais de 100 publicações clínicas revistas por pares, as tecnologias da InMode continuam a estabelecer o padrão de inovação no âmbito da estética médica.

Este crescente corpo de evidência científica sustenta múltiplas indicações e reflete o nosso compromisso contínuo com a excelência clínica.

MORPHEUS8 PRO BURST

Oferece aos médicos múltiplos aplicadores e profundidades de tratamento, permitindo criar protocolos personalizados para o rejuvenescimento cutâneo, a remodelação dérmica, a contração dos tecidos profundos e a reafirmação cutânea não invasiva.

Quer se tratem zonas faciais delicadas ou áreas corporais mais extensas, Morpheus8 PRO BURST adapta-se ao seu fluxo de trabalho clínico com uma versatilidade excecional.

ANTES E DEPOIS

RESULTADOS CLÍNICOS DE UMA PLATAFORMA COMPLETA DE RF



REVITALYZCMD



K. KELLY, MPAS PA-C



D. SEA, ITEC



HL MED SPA



A. GRYUNSHPAN, FNP



DR. B. RICHLAND



DR. S. MULHOLLAND



DIAMOND AESTHETICS



INMODE

WWW.INMODEMD.PT